

MODULAR SOCKET SYSTEM

Fabricación completa de encaje
rígido transtibial en tan solo
90 minutos



El Modular Socket System por Össur

El método y materiales del Modular Socket System (MSS) brindan consistencia en la fabricación de encaje rígido, ofreciendo un encaje rígido bien ajustado listo para usar en tan solo 90 minutos.



Métodos de aplicación

- Laminación estándar sobre el molde positivo
- Laminación directa por sobre el muñón usando Icecast Anatomy o Icecast Compact

Simple y eficaz

- Fabricación completa de encaje rígido y aplicación al paciente en aproximadamente 90 minutos
- Ahorra tiempo a los técnicos

Limpio

- Aplicador de resina de autocontención – no requiere ventilación

Flexible

- Compatible con las siliconas Icross Locking, Cushion y Seal In
- Compatible con los anclajes Icelock 214, Icelock 621 y las válvulas Icelock 551 y Evolution Expulsion Valve plate

Consistente

- Resultados de fabricación consistente una y otra vez

Estandarizado


- Apropiado para todos los niveles de impacto y pacientes de hasta un peso de 166kg (365lbs)
- Cumple con los estándares de calidad ISO 10328 (A100+65%)

Económico

- Todos los componentes se pueden comprar individualmente, en kits iniciales, o en cantidad al por mayor
- Fabricación fácil, simple ensamblaje y remplazo de componentes y accesorios

ICECAST® ANATOMY

El Icecast Anatomy representa un avance en el desarrollo del concepto de toma de moldes. Las cámaras interiores para el contorneado, Contour Cell™, se posicionan sobre los tejidos blandos para forzar un desplazamiento controlado de los mismos, creando una forma del encaje rígido más anatómicamente correcta. Este incremento del control sobre la forma del encaje rígido mejora la comodidad, estabilidad y el control de la rotación. Dado que el muñón está soportado por el instrumento de fundición de presión durante el proceso, se elimina la necesidad de modificar el encaje resultante.

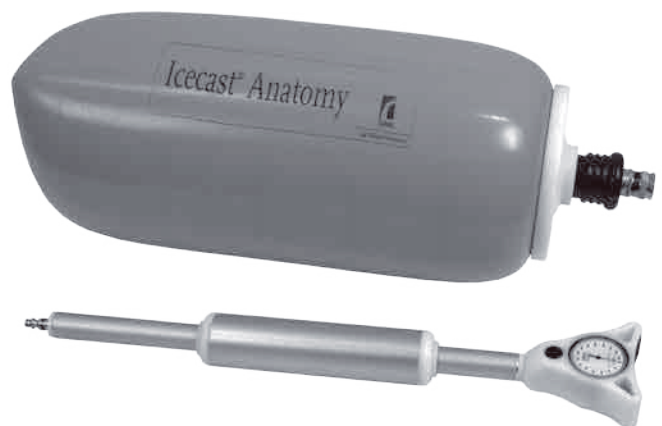

Fabricación simple



Equipo



ENCAJE DE SILICONA MSS

Talla estándar:

- 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34

Código#	Perfil	Método de suspensión
I-09DCXX	2mm	Anclaje



KIT DE HERRAMIENTAS MSS

Incluye:

- Cámara de aire para Icecast Anatomy
- Bomba para Icecast
- Herramienta de inyección de resina
- Herramienta de fijación distal
- Anillo de sellado
- Maleta para Icecast (con accesorios para carrito)

Consumables



KIT DE MATERIAL PARA MSS

Incluye:

- Malla de fibra de vidrio (5" o 7") o malla de fibra de carbono (5" o 7")
- Cartucho de resina
- Tubular aislante de silicona 2x0.6m
- Copa aislante de silicona
- Tubo moldeador

ALMOHADILLAS DE PRESIÓN



Accesorios



Espaciador modular 600 para la serie Icelock 600



Piramide hembra de 4 agujeros con desplazador fijo 20/20, T1



Embrague con 4 -agujeros Icelock 4H 214 para MSS

ACCESORIOS ADICIONALES

- Kit de adaptación para Icelock Ratchet 621
- Kit de adaptación para Icelock Lanyard 631
- Kit de adaptación para Icelock Smooth 651



Carlota Carrasco N°023 - Estación central



(+56) 227794340
(+56) 227797630
(+56) 989202777



www.tecnoplanta.cl
tecnoplanta@tecnoplanta.cl

